



Rumpfstützieder

① Umfang oberer Abschluss _____ cm

② Brustumfang _____ cm

③ Brustbreite _____ cm

④ Brusthöhe _____ cm
oben
unten

⑤ Unterbrustumfang _____ cm

Körbchengröße

⑥ Taillenumfang _____ cm

⑦ Leibumfang/-tiefe _____ cm

⑧ Hüftumfang/-tiefe _____ cm

⑨ Umfang Miederabschluss _____ cm

⑩ Taillenhöhe (bis Unterbrustansatz) _____ cm

⑪ vordere Gesamthöhe
oben _____ cm
unten _____ cm

⑫ gewünschte hintere Höhe _____ cm

⑬ hintere Gesamtlänge _____ cm

⑭ Unterarmhöhe _____ cm

⑮ seitliche Höhe _____ cm

Sonstiges

Kontaktdaten Angebot Bestellung

Kundennummer: _____ Kommission: _____

Anschrift: _____ Lieferanschrift: _____
(falls abweichend)

Telefon: _____ Ansprechpartner: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Halbfertig Fertig Material zur Fertigstellung

Farbe*

Haut Schwarz Weiß

Stoff*

Drell Drell doppelt Jacquard

Vintage Satin

Kids Flowers Jacquard gepunktet

Kids Maritim Spaceman

Rücken

Starke Lordose Rundrücken Normal

Abdomen

Flach Gewölbt Hängeleib

Gesäß

Normal Flach Ausgeprägt

Spina Maß _____ cm **BH-Größe** _____

Ausführung

Unterstützungslasche elastisch mit Haken- und Augenband (3-fach Leiste)

Schritzwinkel

Klettverschluss Haken-/Augenverschluss

Abnehmbar

Innenbinde

Elastisch Teilelastisch Unelastisch

Verschluss*

Vorne Hinten Rechts Links

Haken-/Augenverschluss

Reißverschluss teilbar Nicht teilbar, unterlegt mit Haken-/Augenband

Elastische Seitenteile

Pelotte

Art.-Nr. _____ Größe _____

Stäbe

Anatomisch Flexibel Spiral

Anzahl _____


14 mm 18 mm

Stoma _____ cm

Maßanleitung für Rumpfstützmiester, Korsett, Bustier und Tankini Shirt

TIPP:


Um eine gute Passform zu erreichen ist es von Vorteil über anliegender Unterwäsche zu messen. Alle Maße sollten glatt, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden.

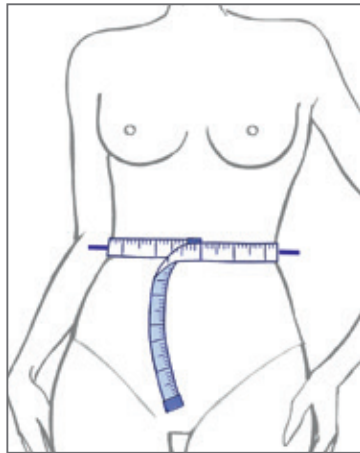

Als erstes sollte die Position der Taillenumfanglinie (in der Abb. blaue Linie) festgelegt werden, indem man das Taillenummaßband waagrecht zirkulär in Höhe der stärksten Taillenumhöhlung legt und dort belässt.


1. Umfang oberer Abschluss

Der obere Abschluss wird waagrecht, zirkulär auf Höhe des oberen Brustansatz, unter den Achseln durch und nach hinten leicht ansteigend gemessen.

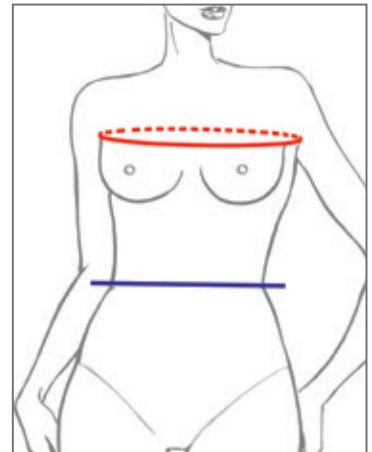


2. Brustumfang


Den Brustumfang misst man waagrecht, zirkulär auf Höhe der stärksten Stelle der Brust bzw. des größten Brustumfangs (üblicherweise auf Höhe der Brustwarzen) nach hinten leicht ansteigend.

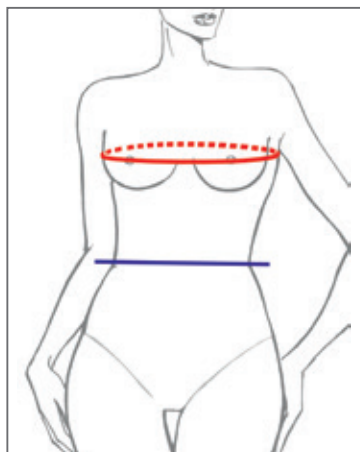

3. Brustbreite

Die Brustbreite wird vom Brustansatz (Grübchen zwischen den Brüsten) über die Brust bis zum seitlichen Brustansatz (bei lose herabhängendem Arm, meist bis kurz davor) gemessen.

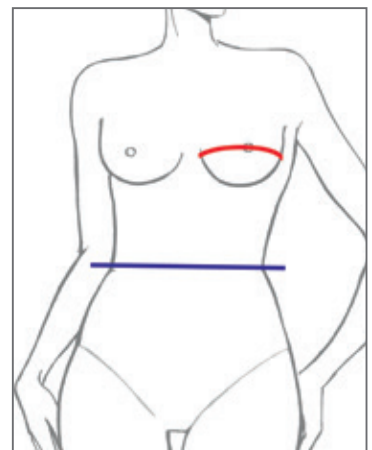


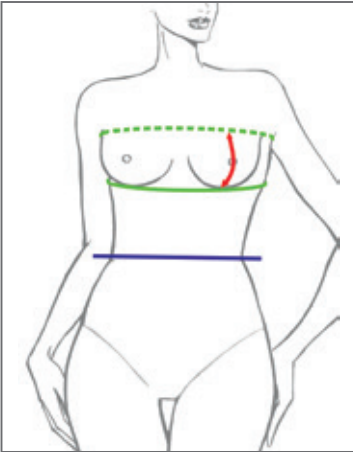


4. Brusthöhe

Die Brusthöhe misst man senkrecht vom oberen Brustansatz über die stärkste Stelle bis unterhalb der Brust.

5. Unterbrustumfang

Der Unterbrustumfang wird zirkulär, vorne direkt unter der Brust und hinten leicht ansteigend gemessen.

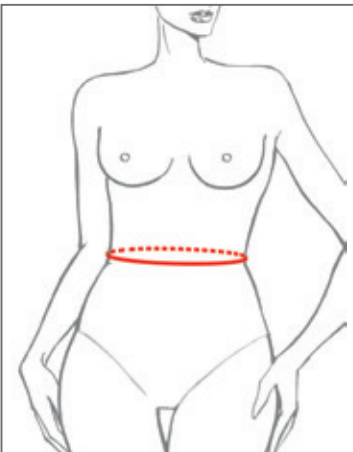
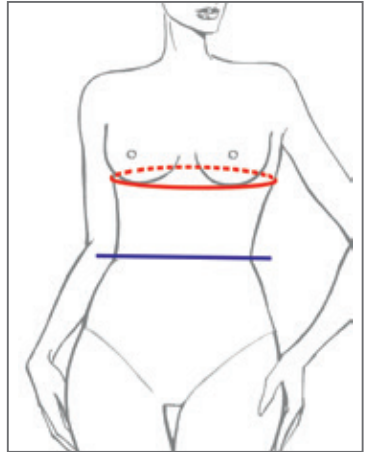


6. Taillenumfang

Der Taillenumfang wird waagrecht, zirkulär in Höhe der stärksten Taillenhöhle gemessen.

7. Leibumfang


Den Leibumfang misst man waagrecht, zirkulär auf Höhe der stärksten Bauchwölbung bzw. des größten Bauchumfangs.

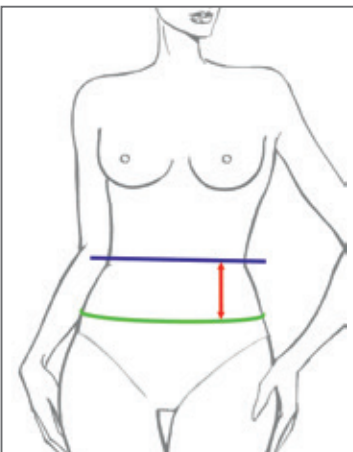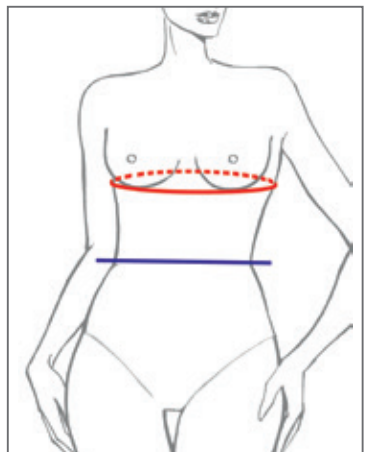

7.1. Leibtiefe

Die Leibtiefe wird senkrecht von der Taillenie bis auf Höhe der stärksten Bauchwölbung/größter Bauchumfang gemessen

Maßanleitung für Rumpfstützmiester


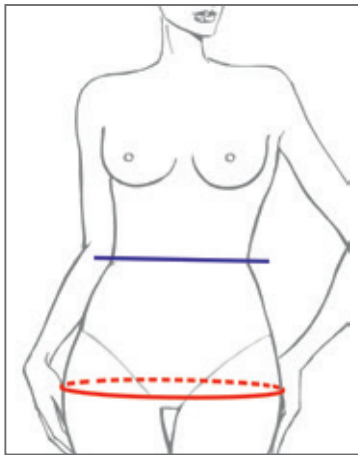


8. Hüftumfang

Hier wird ebenso wie bei Taillen-, Leib- und Unterbrustumfang, waagrecht, zirkulär gemessen. Die Position des Maßbandes liegt hier auf Höhe der stärksten Stelle des Gesäßes.

8.1. Hüfttiefe

Die Hüfttiefe wird senkrecht von der Taillenie bis auf Höhe der stärksten Stelle des Gesäßes/größter Umfang gemessen.

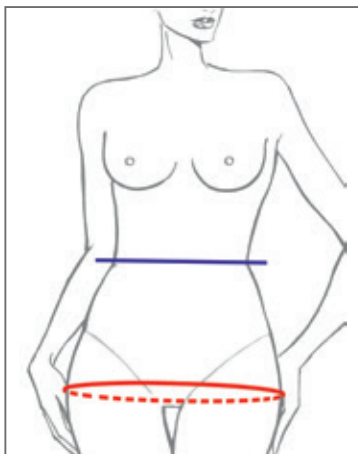
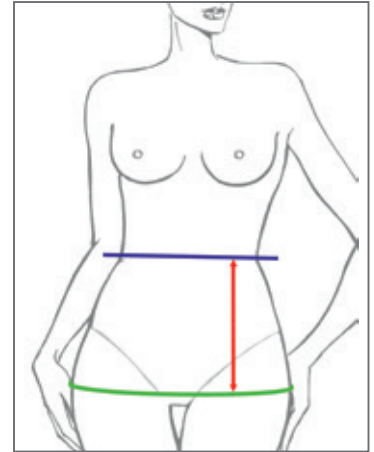


9. Umfang Miederabschluss

Der Umfang des unteren Miederabschlusses wird zirkulär aber nach hinten leicht absteigend (hinten ca. auf Höhe der queren Gesäßfalte) gemessen.

10. Taillenhöhe


Die Taillenhöhe wird senkrecht von der Taillenie bis auf Höhe des Unterbrustumfanges gemessen.

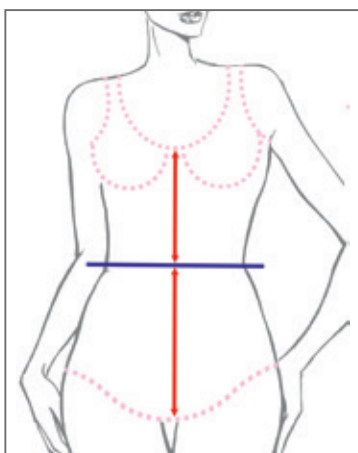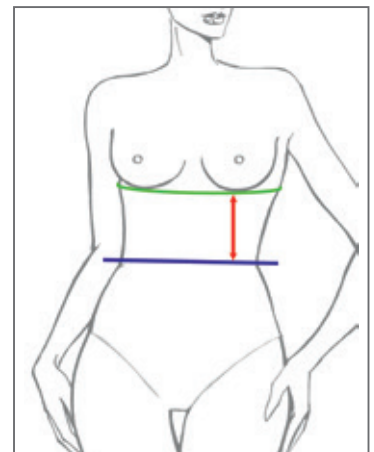

11. Vordere Gesamthöhe oben & unten

Die vordere Gesamthöhe wird je nach Wunsch von der Höhe der Ausschnitt-Tiefe bis zur Taillenhöhe und von dort bis zur gewünschten Höhe des Miederabschlusses bzw. bis zur Oberkante der Symphyse gemessen.

Maßanleitung für Rumpfstützmieder


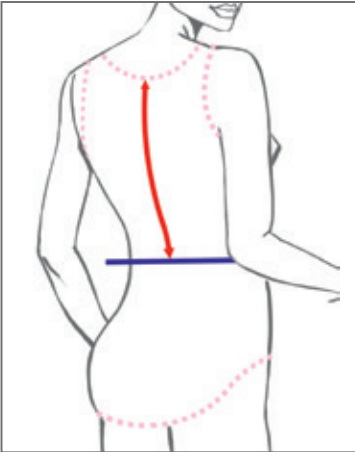


12. Gewünschte hintere Höhe

Hier wird senkrecht, von der gewünschten Höhe des hinteren Ausschnitts bis zur Taillenhöhe gemessen.

13. Hintere Gesamtlänge

Auch hier wird wie bei der hinteren Höhe, von der gewünschten Höhe des hinteren Ausschnitts, über die Taillenlinie bis hin zur gewünschten Länge (meist auf Höhe der unteren Gesäßfalte) gemessen.

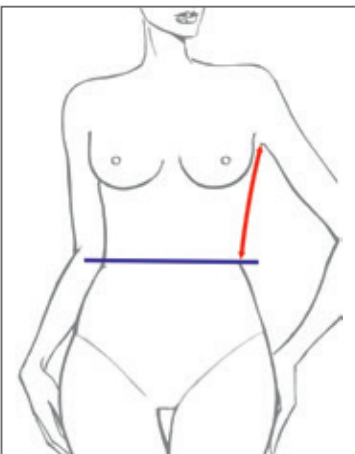
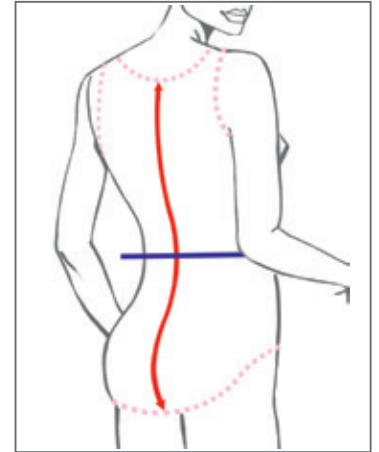


14. Unterachselhöhe

Hier wird unter dem Armansatz bzw. auf der Tiefe des späteren Armausschnitts senkrecht bis zur Taillenlinie gemessen.

15. Seitliche Höhe

Die seitliche Höhe wird von der Taillenlinie bis zum Miederabschluß gemessen.

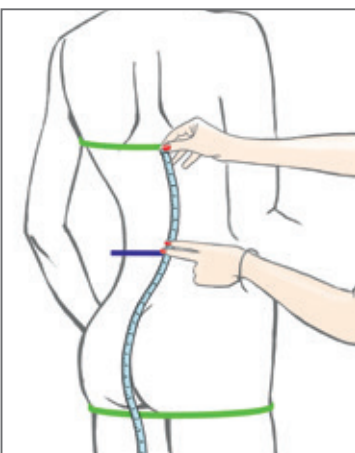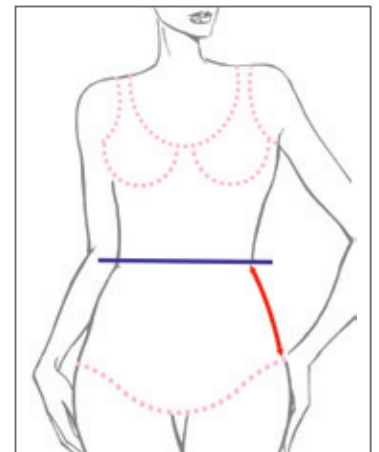

TIPP:

Um exakte Höhenmaße zu erhalten, sollte das Maßband immer entlang der Körperform geführt werden.