



Maßblatt Rumpf



*Pflichtfelder



Maßanleitung

Fax. +49 (0) 78 21 | 93 99 34

- Leibbinde
 Lindemann-Mieder
 Kreuzstützmieder
 Überbrückungsmieder

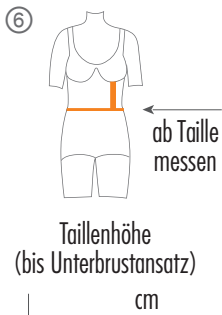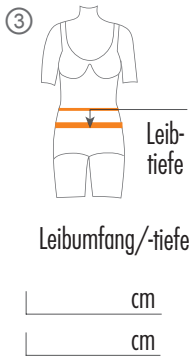

Sonstiges

.....

.....

.....

Kontakt Daten Angebot Bestellung

Kundennummer: Kommission:

Anschrift: Lieferanschrift:
(falls abweichend)

Telefon: Ansprechpartner:

Datum: Unterschrift:

* Halbfertig Fertig Material zur Fertigstellung

Farbe*

Haut Schwarz Weiß

Stoff*

Drell Drell doppelt Jacquard

Vintage Satin

Kids Flowers Jacquard gepunktet

Kids Maritim Spaceman

Rücken

Starke Lordose Rundrücken Normal

Abdomen

Flach Gewölbt Hängeleib

Gesäß

Normal Flach Ausgeprägt

Spina Maß

_____ cm

Schienensatz Überbrückungsmieder

Größe _____

Ausführung

Unterstützungslasche 1-fach gegabelter Gurt

Einfacher Gurt 2-fach gegabelter Gurt

Kreuzgurt Elastisch mit Haken- und Augenband (3-fach Leiste)

Schritzwinkel

Klettverschluss Haken-/Augenverschluss

Abnehmbar

Innenbinde

Elastisch Teilelastisch Unelastisch

Verschluss*

Vorne Hinten Rechts Links

Klettverschluss Wechselseitig

Haken-/Augenverschluss

Schnürung

Reißverschluss teilbar Nicht teilbar, unterlegt mit Haken-/Augenband

Elastische Seitenteile

Elastische Ecken Anzahl _____

Oben Unten

Vorne Hinten

Pelotte

Art.-Nr. _____ Größe _____

Stäbe

Anatomisch Flexibel Spiral

Anzahl _____


14 mm 18 mm

Stoma _____ cm

Maßanleitung für Leibbinden, Lindemann-Mieder, Kreuzstützmieder und Überbrückungsmieder

TIPP:



Um eine gute Passform zu erreichen ist es von Vorteil über anliegender Unterwäsche zu messen. Alle Maße sollten glatt, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden.

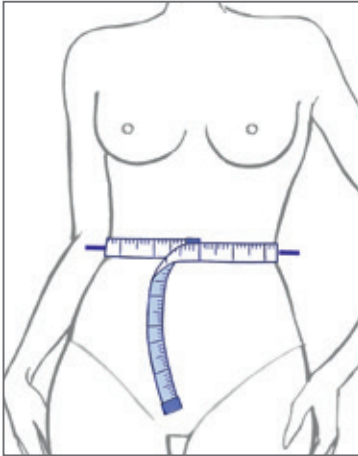

Als erstes sollte die Position der Tailleneile (in der Abb. blaue Linie) festgelegt werden, indem man das Taillemaßband waagrecht zirkulär in Höhe der stärksten Tailleneile legt und dort belässt.

1. Unterbrustumumfang

Der Unterbrustumumfang wird zirkulär, vorne direkt unter der Brust und hinten leicht ansteigend gemessen.

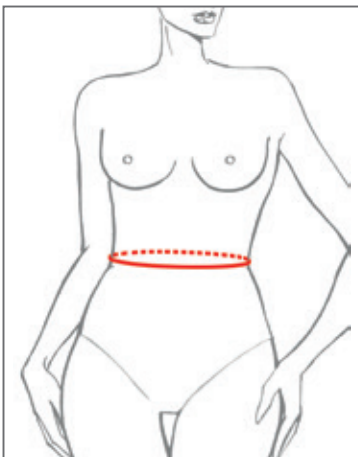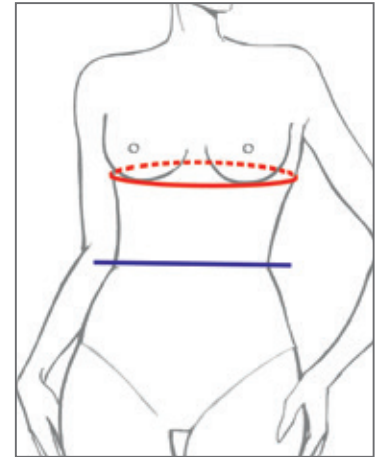


2. Taillenumfang


Der Taillenumfang wird waagrecht, zirkulär in Höhe der stärksten Tailleneile gemessen.

3. Leibumfang

Den Leibumfang misst man waagrecht, zirkulär auf Höhe der stärksten Bauchwölbung bzw. des größten Bauchumfangs.

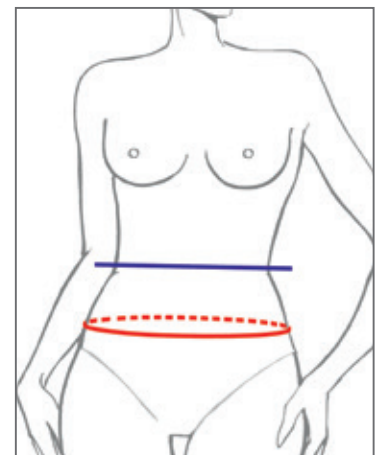

Maßanleitung für Leibbinden


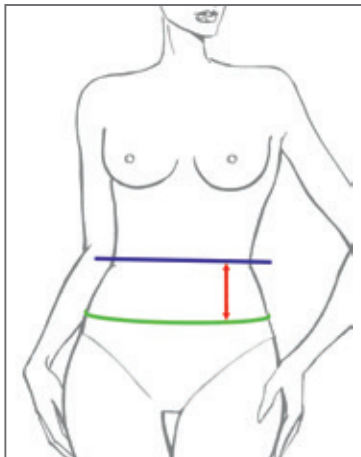


3.1 Leibtiefe

Die Leibtiefe wird senkrecht von der Taillenlinie bis auf Höhe der stärksten Bauchwölbung/ größter Bauchumfang gemessen.

4. Hüftumfang

Hier wird ebenso wie bei Taillen-, Leib- und Unterbrustumfang, waagrecht, zirkulär gemessen. Die Position des Maßbandes liegt hier auf Höhe der stärksten Stelle des Gesäßes.

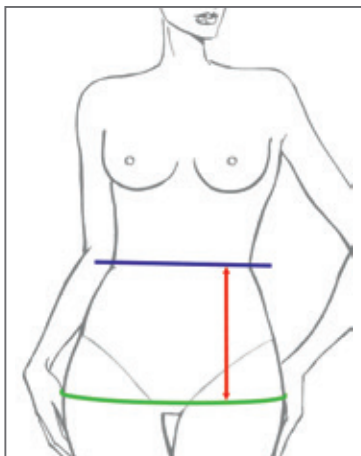
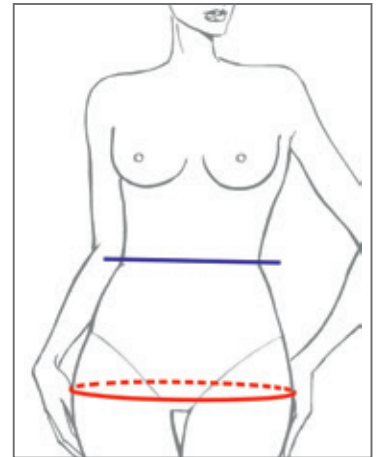


4.1 Hüfttiefe

Die Hüfttiefe wird senkrecht von der Taillenlinie bis auf Höhe der stärksten Stelle des Gesäßes/ größter Umfang gemessen.


5. Umfang Miederabschluss

Der Umfang des unteren Miederabschlusses wird zirkulär aber nach hinten leicht absteigend (hinten ca. auf Höhe der queren Gesäßfalte) gemessen.

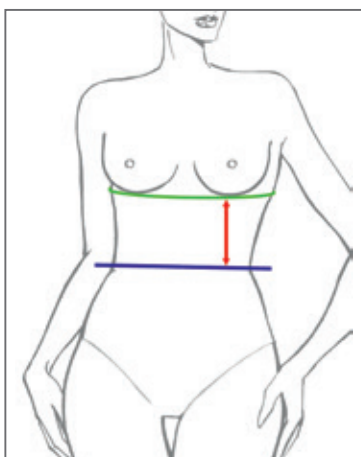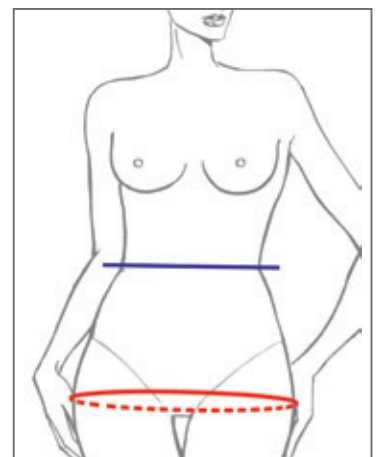

6. Taillenhöhe

Die Taillenhöhe wird senkrecht von der Taillenlinie bis auf Höhe des Unterbrustumfanges gemessen.


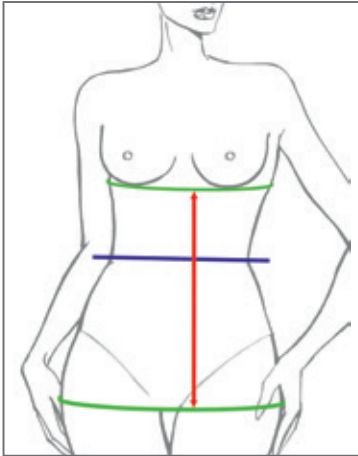


7. Vordere Gesamthöhe

Die vordere Gesamthöhe wird je nach Wunsch von der Höhe des Unterbrustumfanges über die Taillenhöhe bis zur gewünschten Höhe des Miederabschlusses bzw. bis zur Oberkante der Symphyse gemessen.

8. Hintere Höhe

Hier wird im Normalfall knapp unterhalb der Schulterblätter bis hin zur Taillenhöhe gemessen.

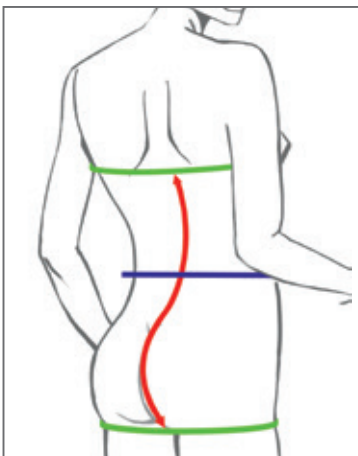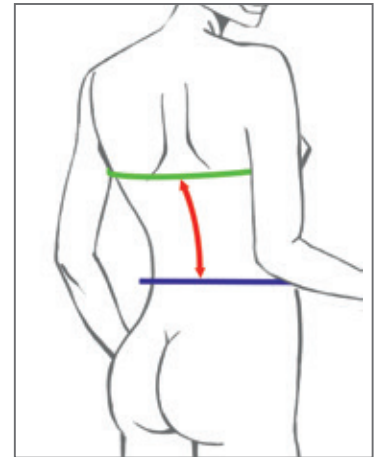

9. Hintere Gesamtlänge

Auch hier wird wie bei der hinteren Höhe von knapp unterhalb der Schulterblätter, über die Taillenhöhe bis hin zur gewünschten Länge (meist auf Höhe der unteren Gesäßfalte) gemessen.

TIPP:

Um exakte Höhenmaße zu erhalten, sollte das Maßband immer entlang der Körperform geführt werden.

